

Silla M4B

Movilidad Eléctrica



reddot winner 2025

Wellell

Silla M4B

Movilidad Eléctrica

La silla eléctrica basculante de última generación **M4B** ofrece una experiencia única gracias a sus muchas especificaciones avanzadas:



Basculación eléctrica del asiento

Permite la basculación hacia adelante y hacia atrás, con un rango de hasta 16° hacia delante y 25° hacia atrás. El usuario puede ajustar mediante el joystick la posición para adaptarla a sus necesidades.




Basculación trasera sincronizada de 25°.



Basculación delantera sincronizada de 16°.

Sistema Dynamic Seat:

Cuenta con un innovador sistema de elevación eléctrico que permite elevar la altura de la silla, para poder adaptarse a distintas situaciones de la vida diaria facilitando el acceso a encimeras, estanterías, mesas...

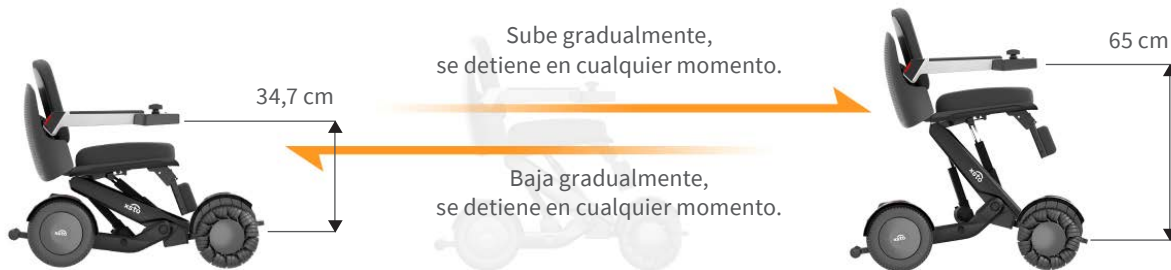

Tecnología Smart Balance:

Diseñada para ofrecer un equilibrio inteligente y seguro. Gracias a su avanzado sensor de postura y a su algoritmo de equilibrio autónomo, el sistema ajusta automáticamente la inclinación del asiento en subidas y bajadas para mantenerlo estable y nivelado. Así, garantiza mayor confort, estabilidad y seguridad en todo momento.




Sistema de plegado automático:

Se pliega y despliega de forma sencilla con una sola acción, ofreciendo una solución práctica y eficiente.



Desmontable en tres partes para su transporte:

Su estructura desmontable en tres partes permite un transporte fácil, adaptándose perfectamente al maletero del coche. Ofreciendo una solución práctica.

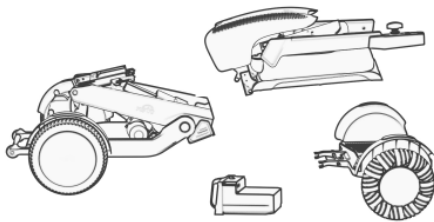

Ruedas Omnidireccionales:

Giros suaves y desplazamientos precisos incluso en espacios reducidos. Cuenta con suspensión en las 4 ruedas. Su radio de giro es de tan solo 82 cm.



Personalizable:

La silla incorpora de serie una elegante carcasa trasera en color blanco. Como accesorio, se ofrece una amplia gama de carcasas para personalizarla, según las preferencias del usuario.



Conectividad inteligente:

Compatibilidad con aplicación móvil que permite un manejo más cómodo e intuitivo, mejorando la experiencia de uso.




Elementos destacados:



Respaldo ergonómico.



Joystick digital posicionable en ambos lados.

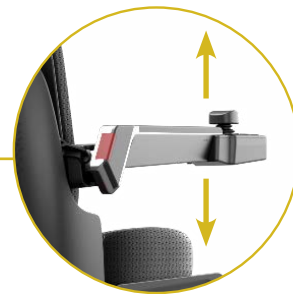

Reposabrazos ajustables en altura y con conector USB.



Asiento con basculación eléctrica.



Cinturón de seguridad retráctil.



Asiento con basculación eléctrica.



Motor de 220 W x 2 uds. (Sin escobillas)



Batería de litio extraíble.



Ruedas delanteras omnidireccionales y suspensión en las 4 ruedas.



Plataforma abatible y ajustable en altura.

Accesorios:



Carcasas de colores (color blanco de serie)




Portabastones



Bolsa lateral



SopORTE móvil

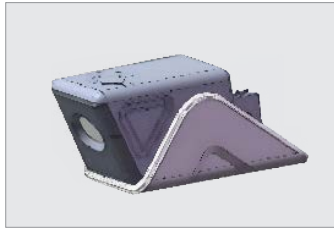


Set luz delantera




(Posicionable en 3 ángulos: 95°, 100°, y 105°).

Respaldo alto

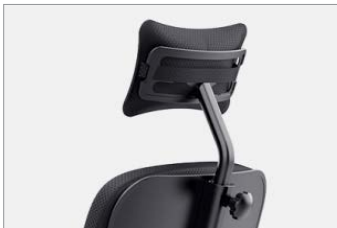

Reposacabezas para respaldo alto

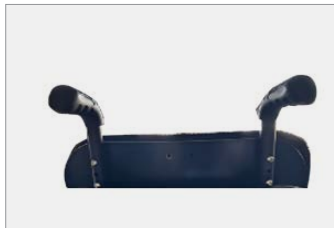

Empuñaduras



Portaparaguas (paraguas incluido)



Batería 24V /10,4 Ah



Apta para viajar en avión



Descripción de producto	Referencia
Silla M4B	0401133
Descripción de accesorios	
Carcasa Negra	04062627
Carcasa Morada	04062632
Carcasa Roja	04062630
Carcasa Azul Enamel	04062628
Carcasa Rosa	04062633
Carcasa Azul Tiffany	04062631
Carcasa Amarilla	04062629
Portabastones	04062644
Bolsa lateral	04062643
Soporte móvil	04062642
Set luz delantera	04062650
Respaldo alto	04062626
Reposacabezas para respaldo alto	04062704
Empuñaduras	04062645
Portaparaguas (paraguas incluido)	04062805
Batería 24V /10,4 Ah	04062649
Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto)	93 x 77 x 76 cm
Peso total de la caja	69 kg



Wellell Iberia S.L.

Elcano 9, 6ª planta
48008 Bilbao. Vizcaya. Spain
T +34 94 4706408
info@wellell.com



Especificaciones técnicas	Silla M4B
Dimensiones desplegada (largo x ancho x alto)	105 x 59 x 105,5 cm
Dimensiones desplegada máxima elevación (largo x ancho x alto)	112,5 x 59 x 119 cm
Dimensiones plegada (largo x ancho x alto)	104 x 59 x 57 cm
Medidas del cojín (ancho x largo x alto)	45 x 39 x 9 cm
Altura del suelo al asiento	47 - 73 cm
Rango basculación eléctrica del asiento	Hacia delante hasta 16° y hacia atrás hasta 25°
Rango de elevación del asiento	30,3 cm (desde 34,7 cm hasta 65 cm)
Altura del respaldo	40 cm
Reposabrazos	Ajustables en 3 posiciones 4 cm
Material del cojín y respaldo	Espuma HR
Reposapiés	Ajustables en 8 posiciones 10 cm
Modos de conducción	Normal y Sport
Peso máximo soportado	115 kg
Peso con baterías	59,8 kg
Peso sin baterías	56,8 kg
Velocidad máxima	6 km/h
Pendiente máxima	6-10° (según condiciones)
Radio de giro	82 cm
Tipo de motor	24 V 220 W x 2 uds. (sin escobillas)
Ruedas delanteras	Omnidireccionales
Ruedas traseras	10". Macizas
Batería	24V /10,4 Ah
Certificados	Marcado CE, REACH y ROHS

Garantía

Bastidor	2 años
Baterías	6 meses

Wellell